

Personal Injector

Injector Anleitung -
nur für die Neue Avonex Prefilled
Syringe zu benutzen.




UNION[®]
UM
MEDICO

Union Medico
Emdrupvej 22
DK 2100 Copenhagen
Phone +45 70266010



1. Ziehen Sie den Spritzenhalter (Schieber) zurück, bis Sie ein „Klicken“ hören.



2. Setzen Sie die Neue Avonex Prefilled Spritze in den Halter. Die Lampe beleuchtet die Spritze, so dass Sie leicht feststellen können, ob sich Luft in der Spritze befindet. Zeigen sich in der Flüssigkeit Luftblasen, ist die Spritze vertikal zu halten. Leicht mit dem Zeigefinger auf die Spritze klopfen, damit sich die Blasen zum oberen Ende bewegen. Drücken Sie den Spritzenkolben vorsichtig nach oben, bis sich ein Tropfen der Flüssigkeit am Ende der Nadel zeigt. Warten Sie, bis die Flüssigkeit klar ist.

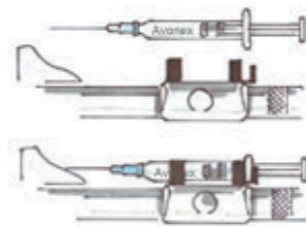

3. Achten Sie darauf, dass die Neue Avonex Prefilled Spritze zwischen den beiden Klemmen fest positioniert ist.

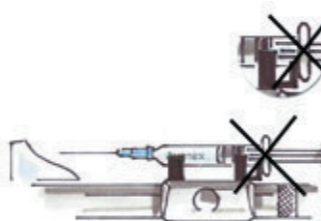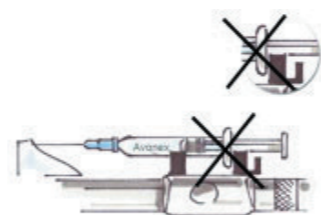


Achten Sie darauf, dass die Position der Flügel der Spritze nicht wie unten hierüber angezeigt ist.

4. Reinigen Sie die Haut an der vorgesehenen Injektionsstelle. *Wir empfehlen als Injektionsort den Oberschenkel.*



5. Bereiten Sie den Selbstinjektor vor: Drehen Sie die geriffelte Sicherheitssperre im Uhrzeigersinn in die Position ON. Halten Sie die Sicherheitssperre mit leichtem Fingerdruck in dieser Position. (Der Selbstinjektor ist nun aktiviert).

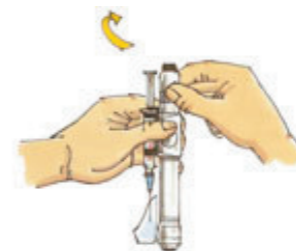


6. Lassen Sie den Selbstinjektor behutsam in einem 90°-Winkel auf dem Injektionspunkt ruhen, bis die Lampe erlischt. *Benutzen Sie in diesem Stadium nicht beide Hände, da Sie dadurch möglicherweise den Spritzenhalter (Schieber) während der Abgabe in der Vorwärtsbewegung behindern.*




7. Positionieren Sie den Zeigefinger auf dem Knopf oben auf dem Selbstinjektor. Mit dem Mittelfinger und Daumen derselben Hand halten Sie weiterhin die geriffelte Sicherheitssperre in der Position ON. Die Nadel dringt in die Haut ein, wenn Sie auf den Knopf oben auf dem Selbstinjektor drücken.




8. Die Lampe beleuchtet die Spritze, so dass Sie leicht feststellen können, ob sich Blut in der Spritze befindet. Halten Sie den Selbstinjektor weiterhin fest in einer Hand, während Sie mit der anderen den Spritzenkolben vorsichtig zurückziehen, um zu prüfen, ob sich Blut in der Spritze befindet.

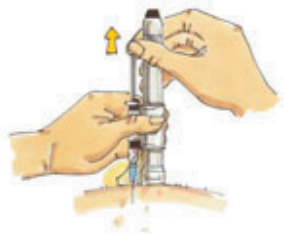

9. Setzen Sie die Injektion fort, es sie denn, es befindet sich Blut in der Spritze. Um das Medikament in den Körper abzugeben, drücken Sie den Kolben langsam herunter.

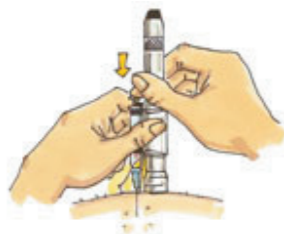

10. Während Sie den Selbstinjektor in einer Hand halten, ziehen Sie mit der anderen den Spritzenhalter (Schieber) rückwärts, bis Sie ein Klicken hören. *Achten Sie darauf, dass Sie den Spritzenhalter nicht loslassen, bevor sie ein Klicken hören, da Sie sonst eine weitere Injektion vornehmen würden.*

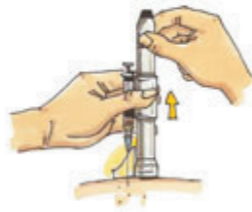

11. Entfernen Sie den Selbstinjektor vom Körper. Dann nehmen Sie die Spritze aus den Klemmen am Scheiber.



12. Lösen sie die Sicherheitssperre am Selbstinjektor und drücken den Knopf oben auf dem Injektor, wodurch der Scheiber vorwärts in seine Startposition gleiten kann. Legen Sie den Selbstinjektor zurück in die Schachtel.



13. **Pflege Ihres Selbstinjektors**
Verwenden Sie niemals denaturierten Alkohol oder starke Lösungsmittel zur Reinigung Ihres Selbstinjektors. Verwenden Sie mildes Seifenwasser und wischen Sie das Gerät mit einem damit befeuchteten weichen Tuch ab.
Batterieaustausch
Wenn das Licht schwach wird, ist es an der Zeit, die Batterie auszutauschen.



14. *Achten Sie unbedingt darauf, dass die winzige runde Kontaktraste und die kleine Feder richtig positioniert sind, bevor die neue Batterie eingelegt wird. Die Kontaktraste muss in dem kleinen Loch liegen und die Feder um das Loch herum. Beide liegen hinter der Batterie.*
Schrauben Sie das Endstück des Selbstinjektors ab. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie. Ersetzen Sie diese durch eine neue Lithium 3-Volt Batterie. Achten Sie darauf, dass die + Seiten nach oben Richtung Endstück des Selbstinjektors zeigen. Schrauben Sie das Endstück wieder auf.